
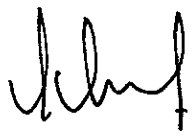


<div></div>	PENGUNAAN ALAT SINGLE USE REUSE		
	No. Dokumen DIR.01.05.01.056	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Alat <i>single use</i> adalah alat medis disposable yang dinyatakan oleh pabrik untuk penggunaan sekali pakai.- Alat Re - Use adalah alat medis yang dapat digunakan kembali.- Alat single use re - use adalah alat medis single use yang akan digunakan kembali oleh karena pertimbangan pengadaan sulit di dapat dan harga yang mahal yang diatur dalam kebijakan.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">— Sterilisasi barang single use digunakan ulang untuk menurunkan biaya Rumah Sakit dalam penyediaan alat kesehatan, memelihara efektivitas dan mutu alat kesehatan steril, mengurangi risiko infeksi, meningkatkan masa pakai alat Kesehatan, menjamin keamanan dan stabilitas alat kesehatan dan enjamin mutu pelayanan sterilisasi		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-068/DIR/XI/2022 Tentang Panduan Singel Use Reuse		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas CSSD melakukan kebersihan tangan.2. Petugas CSSD menggunakan APD lengkap.3. Petugas CSSD memeriksa kondisi alat secara visual apakah masih memenuhi syarat, tidak berubah bentuk, tidak berubah warna, tidak cacat dan mudah di gunakan kembali.4. Petugas CSSD melakukan Proses dekontaminasi, pembersihan, pengemasan dan pelabelan.5. Petugas CSSD mencantumkan catatan penggunaan alat yang berisi : kode penggunaan, nama alat, tanggal sterilisasi.6. Petugas CSSD melakukan proses sterilisasi sesuai dengan jenis alat/bahan.7. Alat single use – reuseable steril harus disimpan dalam tempat tersendiri.8. Petugas CSSD melakukan pencatatan untuk evaluasi dan dokumentasi		
Unit terkait	-		